

スリムヘッド宇宙歯ブラシ

TY *e* - Brush I・II 型

給水と排水が出来る口腔清掃ブラシ

PAT.P.


イーブラシは、口腔清掃用の洗浄ブラシです。

イーブラシには清掃水の給水と、洗浄汚水の排水が同時にできる機能があります。


清掃水の給水は、給水シリンジ・給水ボトル等で行いブラシに内蔵された給水管により口腔内への注水ができます。

清掃中の洗浄汚水等は、ブラシ先端の排水口より吸引器によって除去します。

従って、洗浄中の洗浄汚水が口腔内に溜まることなく又、咽頭部への流入の防止で誤嚥の危険性はありません。

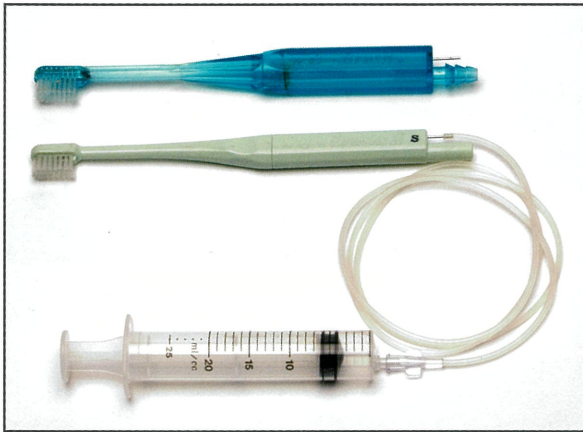

上、イーブラシ I 型
下、スリムヘッド・イーブラシ II 型の
給水チューブと給水シリンジ

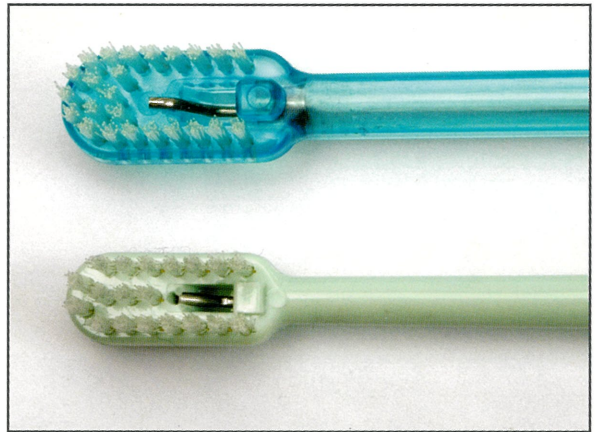

上、イーブラシ I 型
下、スリムヘッド・イーブラシ II 型の
給水管と排水用吸引口

ブラシ部分寸法

I 型 巾12×長さ25×厚み15^{mm}

II 型 巾9×長さ22×厚み13^{mm}



吸引チューブコネクター付



スぺア吸引瓶



YM-2000T 排水器


TY *e* - Brush 専用の吸引器です。
静音多目的で、痰・鼻汁・涎等の吸引にも使用できます。

仕様

YM-2000T	
電源	AC100V 50/60HZ
消費電力	50W
外寸法	W210×D165×H260mm(瓶・取手除く)
重量	6.5kg



外来の使用例

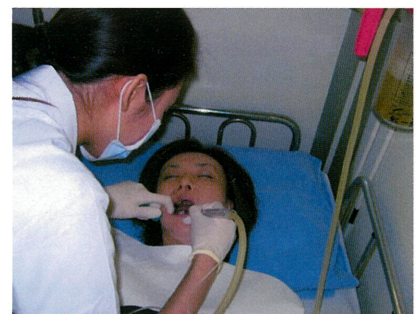


病室の使用例

安全で効率的な口腔清掃 病院 在宅 H・O型

H型イーブラシ (病院用)



O型イーブラシ (在宅用)

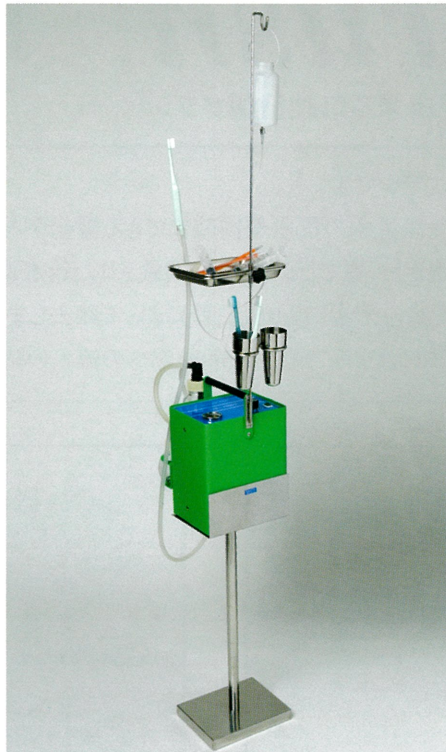

携帯にも便利



一般の使用例

H型イーブラシ

①	イーブラシⅠ型 M	2本
②	イーブラシⅡ型 S SS	4本
③	給水チューブ	6本
④	給水ボトル	1個
⑤	給水シリンジ	2本
⑥	YM-2000T吸引器	1台
⑦	吸引チューブコネクター付	2本
⑧	作業盆固定具付	1組
⑨	洗浄水入れ	1組
⑩	YM-2000T架台	1台
⑪	スペア吸引管	1個

O型イーブラシ

①	イーブラシⅠ型 M	1本
②	イーブラシⅡ型 SS	1本
③	給水チューブ	2本
④	給水ボトル	1個
⑤	給水シリンジ	2本
⑥	YM-2000T吸引器	1台
⑦	吸引チューブコネクター付	1本
⑧	ガートル架	1組
⑨	作業盆固定具付	1組
⑩	洗浄水入れ	1組
⑪	YM-2000T架台	1台
⑫	スペア吸引管	1個
⑬	痰取管	1個

特長

- イーブラシの口腔清掃は、清掃中の洗浄汚水を瞬時に除去する機能を持っています。
- 口腔清掃の清掃水は、給水ボトル・シリンジ等で給水します。清掃中の給水ができます。
- イーブラシの口腔清掃は、清掃中の洗浄汚水をYM-2000T吸引器で瞬時に除去し、口腔内に溜まることはありません。
- 体位はどんな体位でも使用できます。
- ブラシの硬度は、標準M・少し柔らかいS・もう少し柔らかいSSの3種類です。
(子供S・無歯はSSが目安)
- 食べ滓の多い時はⅠ型、洗浄汚水等はⅡ型が最適です

※この仕様は変更することがあります。

SANTO® 三東医科工業株式会社

〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地299

TEL086-206-4425・FAX086-206-4426

<http://www.santoika.co.jp>