


SANTO ホルマリン消臭器

HC-40
HC-70

ホルマリン臭の消臭

PAT.P

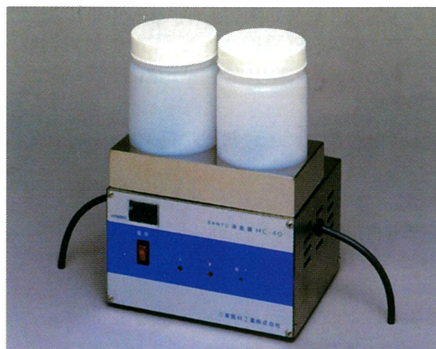

写真はHC-40

品名	SANTO消臭器	
規格	HC-40	HC-70
電源	AC100V50/60	AC100V50/60
消費電力	10W	10W
外寸法(本体のみ)	250×200×215	250×230×215
重量	5.5kg	6kg

ホルマリン消毒の臭気を消す!

従来から使用されているホルマリンガス消毒の自動式消臭器です。

消臭器両側の管を消毒容器に接続し消臭。

消臭容量は、HC-40(約40L) HC-70(約70L)までの容器に使用できます。

※形状によっては使用できない場合があります。

SANTOホルマリンガス消毒容器



H-1型 W500×D320×H320mm 棚3段
H-2型 W600×D320×H230mm 棚2段

消毒容器の棚はガスの拡散が良く腐食もしないステンレス製の網棚を使用。

■4.7開閉トレー

消毒剤(エフゲン)を入れる蓋付トレーで消臭をする時、消毒容器の外側よりトレーの蓋を閉めホルマリン臭の軽減をします。

SANTO消毒架台



1型 W500×D350×H800mm (H-1)
2型 W600×D350×H800mm (H-2)

消毒容器・消臭器の整理台

消毒後ホルマリン臭がない、安価で手軽な消毒。

SANTO ホルマリンガス殺菌ガード

ホルマリンガス消毒の化学的インジケータ



写真は使用前・使用後の色調 250枚入

SANTOホルマリン殺菌カードは、ホルマリンガス消毒の殺菌効果を確認するカードです。

カードの色調は殺菌工程で黄色から濃茶に変わります。

殺菌後のカードは台紙に貼って保存をすることができます。

殺菌条件の一例

容器種類	H-1容器
温度	23~24℃
湿度	50~65%RH
滅菌時間	5時間
消毒剤	8g (エフゲン)
供試菌	Bacillus atrophaeus (NRRL#B4418) 枯草菌 孢子量 10^6
LotNo	A60147

※容器の加温・消毒剤の増量は殺菌効果を短縮します

イーデス S型

ホルマリンの送気



- 消臭AB 3入
HC-40 HC-70
- 消臭AB-N 4入



滅菌バッグ・スケルトン

- HCHO-100 50×100m巻
- HCHO-101 70×100m巻
- HCHO-102 100×100m巻
- HCHO-103 150×100m巻
- HCHO-104 200×100m巻
- HCHO-105 250×100m巻
- HCHO-106 300×100m巻
- HCHO-107 350×100m巻



FO・AC・EO付の滅菌バッグもあります。


ラク N型

小型の手動式消臭




滅菌トレー

- ① W350×D250×H30mm
- ② W400×D250×H30mm
- ③ W450×D250×H30mm

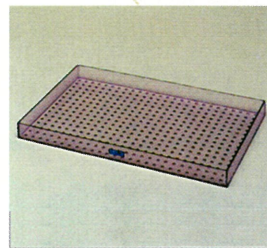

ポリシーラー (テーブル付)

シール寸法:幅2mm・長さ300mm
AC100V-380W

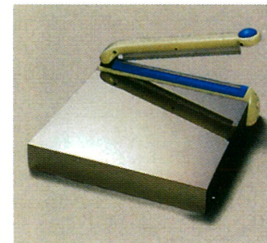

※この仕様は変更することがあります。

SANTO® 三東医科工業株式会社

〒113-0034 東京都文京区湯島2-7-3

☎03(3811)6107・FAX03(3816)5535

<http://www.santoika.co.jp>